

**TESTLIVER™ -Rat-**

Rat Hepatocyte Organoid / 3次元培養ラット肝細胞

(Code:TRHO-001)

**取扱い説明書**

**< ご注意 >**

本製品の使用は研究用に限定されています。ヒトまたは動物への適用及び臨床診断への使用はできません。

**本取扱説明資料を、ご使用前に必ずお読みください。**

## 1．製品内容

3次元培養ラット肝細胞（中空系バンドル6セット、3cm長中空系6本／バンドル）  
中空系バンドルは容器内の培地に浸漬した状態でお届けしています。

## 2．製品の受け入れおよび保存

- (1) 製品が入荷したら直ちに開梱し、製品の本数及び輸送による破損が無い、培地等の液漏れはないか、ご確認下さい。異常がある場合には直ちに、東洋紡バイオ事業部（Tel:06-6348-3786）までご連絡下さい。
- (2) ラット肝細胞は、中空系バンドル内に遠心充填され、生きた状態で培地に浸してお届けしております。  
到着後直ちに培養ができるよう準備をし、到着した日のうちに必ず培養を開始してください。準備ができるまでは、室温（約20-30℃）に保存してください（絶対に冷蔵保存はしないでください）。

## 3．培養に必要な機器、器具

- (1) 機器
  - クリーンベンチ
  - CO<sub>2</sub> インキュベーター
  - 振盪器（CO<sub>2</sub> インキュベーター内に設置）
  - その他必要に応じ、アスピレーター等
- (2) 器具または器材（滅菌されたもの）
  - 先細ピンセット 2 本（バンドルをつかむのに使用します、またタグ部がくっついている場合はピンセット 2 本を使用して引き離します）
  - 培養容器（6 穴プレートまたは 35mmシャーレが適しています）
  - ピペット
  - その他必要に応じ、マイクロピペット、チップ等

## 4．培養方法

中空系バンドルお取扱いにあたって以下の点にご注意ください。


中空系バンドルは非常に折れやすいものですので、取扱いには充分注意してください。

バンドルをつかむ場合には、必ずタグ部（シリコン接着部）をつかんでください。

中空系部全体に細胞が充填されていますので、中空系部はつかまないでください。

タグ部どうしはくっつき易くなっております。タグ部が重なってくっついている場合は 2 つのピンセットを用いて、無理にひっぱらず慎重に離してください。無理にひっぱるとちぎれる場合があります。

中空系は常に濡れた状態で乾燥させないようにご注意ください。

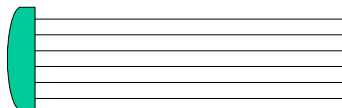

タグ部

中空系部

以下の操作はすべてクリーンベンチ内で行なってください。

**(1) 培養容器の準備**

6 穴プレート 1 枚または 35mmシャーレ 6 枚を用意し、各ウェルまたはシャーレに 2 ml づつ培地を入れます。

**(2) 中空系バンドルの取り出し**

クリーンベンチ内にてコンテナ容器周囲をエタノールで拭いて消毒します。

チューブのキャップを静かに開けます。この時、培地に手が触れないようご注意ください。また培地をなるべくこぼさないようご注意ください。

容器内の中空系バンドルを滅菌ピンセットを使って取り出し、培養容器に移します。

この時、必ずバンドルの上端部(タグ部)をつまんで取り出してください。

タグ部が重なってくっついていている場合は 2 つのピンセットを用いて、無理にひっぱらず慎重に引き離してください。無理にひっぱるとちぎれる場合がありますのでご注意ください。(万一、タグ部がちぎれましても培養性能には差し支えなく実験ができます。)

各ウェルまたはシャーレに 1 つづつバンドルを入れていきます。

CO<sub>2</sub> インキュベーター内にて旋回(振盪)培養します。旋回の目安は、毎分 4 5 回転程度です。培地が徐々に攪拌されていれば大丈夫です。

培地交換は、最初の 3 日間は毎日、その後は 1 日おきにおこなってください。

- \* 10cmシャーレに培地を16ml入れ、バンドルを 1 つまたは 2 つ入れた場合、3 日間培地交換が不要となります。週末など培地交換が出来ない場合には、この方法を利用ください。培地交換の際、中空系が乾燥しないよう注意してください。培地を除去したあとは、なるべくすみやかに培地を加えてください。

## 5 . 廃棄

実験終了後は、オートクレーブなどの滅菌処理をしてから廃棄してください。

- ・ 本製品の使用は研究用に限定されています。ヒトまたは動物への適用及び臨床診断への使用はできません。
- ・ 本製品はマイグレーションについては陰性であることを確認していますが、その他のウイルス検査を行っておりません。細胞の取り扱いには十分にご注意下さい。
- ・ 本製品の使用によって生じたいかなる事故あるいは損害についても弊社では責任を負いかねます。ご了承の上ご使用下さい。

**製造元**

**東洋紡績株式会社**

(大阪)バイオ事業部 〒530-8230 大阪市北区堂島浜二丁目2番8号

TEL : 06-6348-3786 FAX : 06-6348-3833

(東京)バイオ事業部 〒103-8530 東京都中央区日本橋小網町17番9号

TEL : 03-3660-4819 FAX : 03-3660-4951